



Drivringar

SWE

2018/2019



DRIVRINGAR

Oändlig perfektion

För snart 25 år sedan startade Decon med att tillverka drivringar i liten skala.

Verksamheten växte och i början av år 2000 tillverkade vi ca 1500 drivringar varje dag. Idag tillverkar vi ca 20 tusen drivringar varje år med focus på användaren.

MATERIAL



Standard rund profil



Titan

Titan drivringar används främst till aktiva åkare som eftersträvar extrem hållfasthet i kombination med låg vikt. Rekommenderas till alla typer aktivstolar/ idrottsstolar.



Friktion S profil



Friktion s

Tillverkas i specialprofil som är gjord av aluminium. Profilen utrustas med en gummiprofil på ovansidan av drivringen. Genom denna kombination uppnår man två drivringar i en; friktion (gummiprofil) till framdrivning och sidan på drivringen vid bromsning. Rekommenderas till aktivåkare som behöver mer friktion för att uppnå fart och ändå kunna bromsa utan att bränna fingrarna.



Standard rund profil



platt profil



Polymer kompakt

Tillverkas i aluminium. Efter tillverkning behandlas ringen med en typ av plast som känns mycket behaglig. Denna har mycket friktion och är skön att hålla i och upplevs som varm. OBS! vid kraftig bromsning kan det upplevas som man bränner sig. Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt utförande, se profilbild vid sidan om texten (platt profil). Rekommenderas till användare som har nedsatt styrka i händerna.



Standard rund profil



platt profil



Tetra Grip

Tillverkas i aluminium. Efter tillverkning behandlas drivringen med en typ av plast som är mjukare än kompaktmodellen, med hög friktion. Denna typ av drivring tillverkas i ergonomiskt utförande, se profilbild vid sidan av texten (platt profil). Rekommenderas till användare som har nedsatt styrka i händerna.



Standard rund profil



Max grepp


Tillverkas i aluminium. Efter tillverkningen vulkas gummi runt om drivringen. Denna är mycket mjuk och har extremt hög friktion. Rekommenderas till användare som har mycket nedsatt styrka.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0345 - 408 80 eller info@decon.se

VIKTIG ALLMÄN INFORMATION



Ytterdiameter på drivringen är inte Monteringsmått.

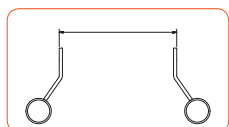

Monteringsmått drivring med vinklade öron.



Monteringsmått raka öron.



Monteringsmått popnuts med 15 graders lutning observera standard distans 20 mm.



Monteringsmått raka popnuts måttet är alltid c/c i mutter hållet.



DRIVRINGAR

1 BESTÄLLNINGSMALL ÖRON OCH POPNUTS

1. VÄLJ MATERIAL

- 1) Titan - 16 mm
- 2) Titan - 19 mm
- 3) Friktion S
- 4) Polymer Kompakt - rund
- 5) Polymer Kompakt - platt
- 6) Poly Gele - rund
- 7) Poly Gele - platt
- 8) Max Grepp



Standard
rund profil



Friktion S
profil




platt profil

2. ANTAL ÖRON ELLER POPNUTS

Öron

Popnuts

3. YTTERDIAMETER

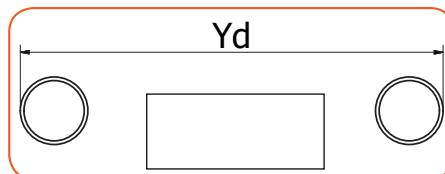

4. INFÄSTNINGSMÅTT

Enbart 1 typ är möjlig. Vid val av vinklade öron så finns två olika typer vinklat öra, infästnings mått +18mm alternativt 32mm = centrum mått drivring.

	ÖRON	POPNUTS
VINKLAD		
RAK		

5. SKICKA FORMULÄRET TILL DECON (MAIL ELLER FAX)

» OÄNDLIG PERFEKTION

För Decon är en drivring inte bara en ring gjord av metall. För oss är det en högteknologisk produkt som är anslutningselementet mellan människor och rörelsen. Från att ha varit en massproducent av drivringar i många olika material, har vi idag valt att fokusera på drivringar som tillför något extra till våra användare. Såsom Titan och olika typer av friktionsdrivringar .

Ringsystemet för montering av en drivring varierar beroende på märke och typ av rullstol. I allmänhet finns det två olika metoder för montering: Öron eller Popnuts. Inom varje grupp kan du välja mellan rakt eller vinklat utförande (se tabell).

Under de senaste 25 åren, har vi producerat mer än 1 000 000 drivringar. Våra medarbetare producerar idag fortfarande det mesta för hand. Detta personliga engagemang och precisionsarbete blir ett hantverk som är unikt på marknaden.

Om du har ett mer personligt önskemål om mått och design, är det inget problem. Vi tillverkar ringar i alla storlekar och utföranden.

På sidan, till vänster om denna text, finns en beställningsmall som lotsar dig enkelt och effektivt genom beställningsprocessen. Du kan använda denna mall för både förfrågningar och beställningar. Mallen finns även på vår hemsida.

För att bedöma komfort och kvalitet på våra drivringar, har vi tagit fram en drivringsdemo, där alla våra sorter är representerade.

Vi förstår bättre än någon annan hur komplicerat det kan vara att komma fram till rätt drivring. Tveka därför inte att ringa oss med alla frågor du har.

Vi hjälper dig gärna!



HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESTÄLLA?

0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Checklista för att beställa

- Välj material
- Välj mellan öron eller popnuts
- Välj mellan rak eller vinklad
- Bestämma ytterdiameter
- Bestämma monteringsmått
- Fyll i beställningsmall
(finns även på www.decon.se
under drivringar)
- Maila eller faxa till Decon på
0345-40895
- Kontrollera orderbekräftelse

Polymer Kompakt drivring med raka öron



 **decon**

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
© Alla rättigheter är reserverade för Decon®. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.